


weitere, erfolgreiche Entwicklungen
der letzten 33 Jahre :




Twin Jection

mundgeschlossene, gleichzeitige
Abformung von OK und UK mit externer,
aktiver Injektion der Korrekturmasse

Modellherstellung: Kiefer Plus, Split, K' volution

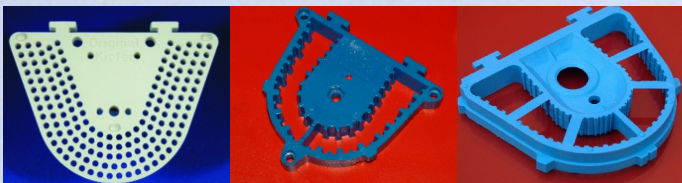

verschiedene Varianten der Modellherstellung mit oder ohne
Pin, die außergewöhnliche Präzision der Systeme ist seit
Jahrzehnten bekannt. Extrem geringer Gipsbedarf, keine
speziellen Maschinen benötigt und wiederverwendbar

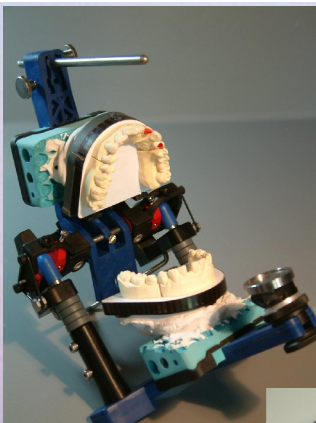

wk - light

der "Mehrwertartikulator"
bietet alles, was ein Top
Artikulator bieten muss, ist aber
auch stufenlos oder abgestützt
höhenverstellbar und kann die
Kompression des "humanen dis-
cus articularis" imitieren.

Jeder Gesichtsbogen kann - unserer
Erfahrung nach - angelegt werden !



Poly Plus 2000 S



2 Splitcastsysteme
Tri Ma Split" oder
"Quattro Split"



Ordungstray nach Dr. Fischer

ideal zur lagerichtigen
Sortierung zu zementierender
Teile z.B. Veneers oder
Implantate



Denta Dampf 2000 n.G.

2 Liter Kesselinhalt,
bis zu 5,5 bar Druck,
7 Jahre Garantie auf massiven Alukessel, Heizung und
Edelstahlgehäuse

nur € 798,00, ab Werk zuzügl. MWSt.

*relativ einfache, aber robuste und
zuverlässige Technik !*

Dental Kiefer
Inge H. Kiefer
Hüttenwerkstr. 24
D-66763 Dillingen

Wilhelm Kiefer Dental
Wilhelm H. Kiefer
Waldstr. 14
D-66763 Dillingen

Tel.: 0033/ 3 8889 4030
Fax.: 0033/ 3 8889 4702
email: dentkiefer@aol.com
www.dental-kiefer.com

Unsere Qualitätsoffensive 2017

7 Jahre Garantie

auf

Heizkessel + Heizung + Gehäuse V2A

Wieso machen wir das ?

na.....weil wir es können !!!!

denn wir verfügen über 30 Jahre
positive Erfahrungen mit unserem Denta Dampf

Denta Dampf 2000 n.G.



DENTAL KIEFER

nur € 798,00

ab Werk
zuzügl. MWSt.
+ Versand

Denta Dampf 2000 n.G.

erweiterte

Garantie

auf **Heizkessel ,Heizung
und Gehäuse**

7 Jahre

Neue - hochwertige Armaturen
inkl. Manometer



mechanisches, zuverlässiges
Sicherungsventil



optionaler Druckluftanschluss
mit separatem Fusspedal
Aufpreis € 148,00 netto




Gehäuse aus massivem
- besonders pflegeleicht


Edelstahl

Technische Daten:

- Heizung ist im Alukesselboden **eingegossen** -
kann daher nicht verkalken!
7 Jahre Garantie auf den Heizkessel + Heizung + Gehäuse
- Kesselinhalt: 2 l - reicht theoretisch um
fast 3 Stunden am Stück zu dampfen.
- Arbeitsdruck ca. 4,5 - 5,5 bar !
- maximale Leistung : 1,8 kW
- Dampftemperatur im Kessel ca. 145°C
- Maße: Höhe: ca. 24 cm Breite und
Tiefe: ca. 34 cm
- Gewicht: ca. 9 kg
Änderungen Vorbehalten

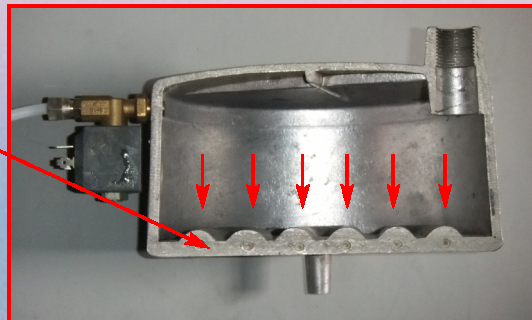

extrem robuster Heizkessel - Heizung im massiven Aluboden
eingegossen - daher keine Verkalkung der Heizung !!!

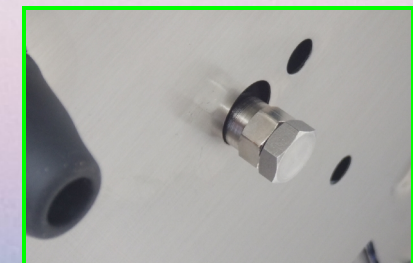

Ablassschraube im
Kesselboden zum
leichteren Entkalken des
Kessels